



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

EQUIPA MENTOS

Especificações
Técnicas



✦ DERMÓGRAFOS

Você sabe que para obter um bom resultado na sua micropigmentação é essencial, além do estudo de pigmentos e da técnica, a escolha da agulha correta e apropriada para cada tipo de técnica, pele e implantação. Além disso, a escolha do equipamento correto é essencial.

Continua conosco que vamos te ajudar a entender melhor sobre os

EQUIPAMENTOS



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

TIPOS DE EQUIPAMENTOS



TEBORI

Tebori (que em japonês significa: tatuar com as mãos) é um induor manual usado para marcar a pele utilizando microlâminas de tamanhos diferenciados que variam de 5 a 17 pontas. Usando pigmento para a coloração.

DERMÓGRAFO

O Dermógrafo é um aparelho elétrico que, através de uma agulha descartável, aplica pigmentos na camada superficial da pele. Permite a criação de diversos efeitos, de forma rápida e quase indolor, podendo ser utilizado em procedimentos de acordo com a técnica aplicada pela profissional.



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE DERMÓGRAFOS



DERMO MAG PEN

Anatômico e ergonômico, tem corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e se encaixa facilmente nas mãos de qualquer profissional. Seu funcionamento em baixa rotação e sistema de propulsão por rolamento, permite torque adequado para as diversas técnicas e áreas à pigmentar.

Utiliza um sistema de **Agulhas de Rosca**. Através do movimento pulsante da agulha, é realizado um trabalho de sucção do pigmento no interior da Ponteira. Este movimento, irá realizar o trabalho de expulsar o pigmento da Ponteira, penetrando na derme com alta frequência inserindo o pigmento.

Peso: 73 g.

Comprimento: 140 mm.


Diâmetro: 24 mm.

Tensão de Operação: 11 a 14 V.

Velocidade do motor: 6000 RPM.

Batidas: Aproximadamente 100 batidas por segundo (alimentado com 12 V).

CLICK AQUI

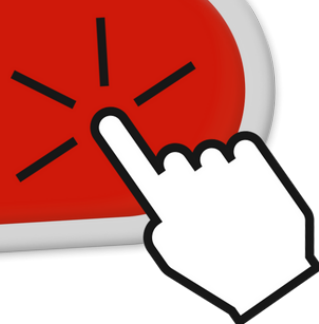

Como montar corretamente seu Dermo Mag Pen



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE DERMÓGRAFOS



DERMO MAG PLUS

Um produto sofisticado e arrojado, tem corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e se encaixa facilmente nas mãos de qualquer profissional. Possui em seu interior componentes de alta precisão, capazes de gerar um movimento pulsante perfeito, o que faz com que a agulha adentre na pele dos pacientes aplicando o pigmento de forma homogênea.

Utiliza um sistema de **Cartuchos de Tatuagem Universais**, considerado como tendência no mercado atual, onde a altura dessas agulhas podem ser ajustadas através do Conjunto Regulável.

Peso: 70 g.

Comprimento: 120 mm.

Diâmetro: 25 mm.

Tensão de Operação: 11 a 14 V.

Velocidade do motor: 6000 RPM.

Batidas: Aproximadamente 100 batidas por segundo (alimentado com 12 V).

CLICK AQUI



Como montar corretamente seu Dermo Mag Plus



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE DERMÓGRAFOS



DERMO MAG EASY

Possui um sistema regulador interno, sendo possível ajustar à altura das exclusivas agulhas **Easy Balance**. Mais leveza e precisão, deixando os resultados dos procedimentos perfeitos.

Possui um micro motor de altíssima qualidade e durabilidade, resultando em uma incomparável confiabilidade do equipamento. O produto ainda é composto por mecanismos modernos que transformarão os movimentos mecânicos em movimentos pulsantes, realizando um trabalho de forma silenciosa e totalmente controlada.

Peso: 79 g.

Comprimento: 135 mm.

Diâmetro: 24 mm.

Tensão de Operação: 11 a 14 V.

Velocidade do motor: 6000 RPM.

Batidas: Aproximadamente 100 batidas por segundo (alimentado com 12 V).

CLICK AQUI



Como montar corretamente seu Dermo Mag Easy



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE FONTES




FONTE ANALÓGICA

O controlador de velocidade Analógico, utilizado junto à qualquer modelo de dermógrafo da Dermo Mag, tem como função receber a tensão nominal da rede elétrica (110/220V) e transformá-la em tensão contínua (15V).

O controlador de velocidade analógico possui uma saída para conexão modelo P2 com o dermógrafo, com variação de velocidade através de um potenciômetro, podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do cliente.

CLICK AQUI

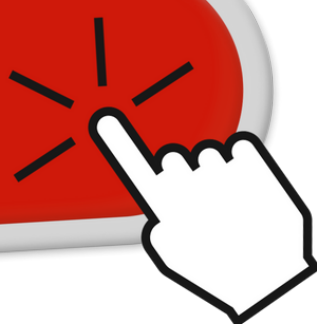

Conheça as
agulhas
DERMO MAG



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE FONTES




FONTE DIGITAL

A fonte Dermo Mag DUO possui 2 entradas com conexão realizada pelo Cabo Conjugado P2 ME, e pode ser utilizado junto à qualquer modelo de dermógrafo da Dermo Mag. Tem como função receber a tensão nominal da rede elétrica (110/220V) e transforma-lá em tensão contínua (15V).

Com a variação de velocidade e o aumento linear, pode ser ajustada de acordo com a necessidade do cliente.

CLICK AQUI

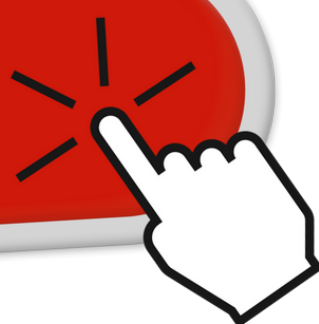

Conheça as
agulhas
DERMO MAG



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE TEBORIS



TEBORI SIMPLES

Indutor Manual com um acoplador de lâminas, para atingir alta performance nos seus atendimentos.


Possui um formato ergonômico, e é confeccionado em alumínio de alta resistência.

Compatível com lâminas de 5 até 17 pontas

Peso 0.250 Kg

Dimensões 157mm x 27mm (Comp. x Diam)

CLICK AQUI

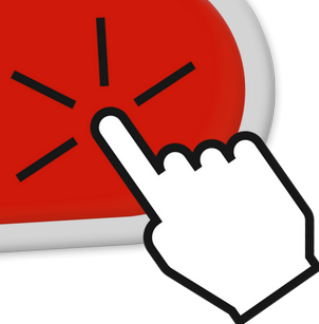

Conheça as lâminas
LOV BEAUTY



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE TEBORIS



TEBORI DUO

Indutor Manual com dois acopladores de lâminas, para atingir alta performance e mais velocidade nos seus atendimentos. Possui um formato ergonômico, e é confeccionado em alumínio de alta resistência.

Compatível com lâminas de 5 até 17 pontas

Peso 0.250 Kg

Dimensões 157mm x 27mm (Comp. x Diam)

CLICK AQUI



Conheça as lâminas
LOV BEAUTY



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

EQUIPA MENTOS

Especificações
Técnicas